

Structure en acier époxy, parties coulissantes zinguées. Mains courantes en forme anatomique en métal époxy réglables en hauteur avec un système télescopique. Les boutons étoile empêchent tout dévissage et mouvement des mains courantes pendant l'utilisation. Marches de hauteurs différentes avec contremarches revêtues en PVC antidérapant. L'escalier peut être placé en pont ou en angle.

## CODE 132030 ESCALIER DE RÉÉDUCATION À DEUX VOLÉES



### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY


Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur mains courantes	60 – 100 cm
Largeur de marche	56 cm
Giron de marche	30 cm
Hauteur de marche	13 – 16 cm
Charge maximale de chaque main courante	135 kg

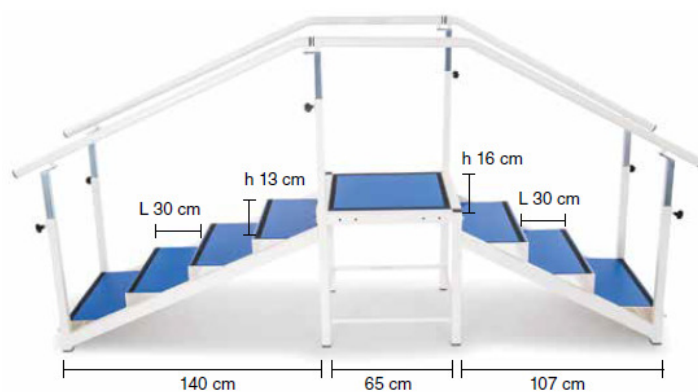

### FISIOTECH SRL


Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS

Code	Description	
132200	Plan incliné dimensions cm 170x49	

### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956